



# 1. 기본적인 제품 사용방법.

**1**

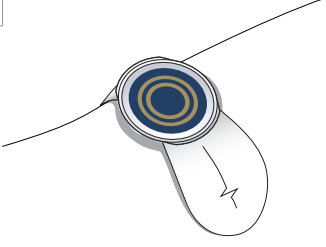


자극부위에 전극을 부착한다.  
한쪽을 먼저 부착하고 다른쪽을 당기면서 밀착시킨다.

**2**

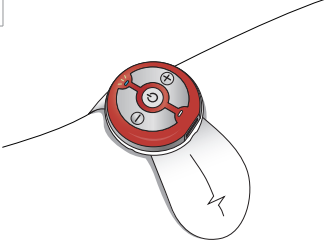


자극기를 전극에 결합한다.  
자극기와 전극은 자석으로 쉽게 결합된다.

**3**

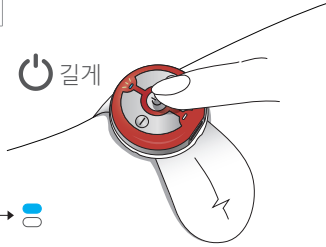


전원버튼을 길게 (3초) 눌러 자극기 켜기.  
비프음과 함께 램프A가 **녹색**으로 깜빡이며 전원이 켜진다. 곧 **파랑색**으로 바뀌며 두드림 모드 상태로 대기한다.

**4**

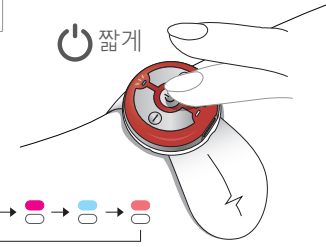

전원버튼을 눌러 자극모드를 선택한다.  
버튼을 누를 때마다 램프A의 색상과 모드가 변경된다. (두드림-주무름-지압-조합)


**5**

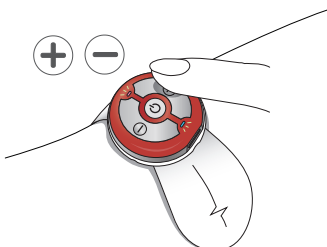

증가/감소버튼을 눌러 자극 강도를 조절하여 사용한다.  
- 증가버튼을 누르면 램프B가 **하늘색**으로 점멸하며 전기자극이 시작된다.  
- 증가/감소버튼을 눌러 조정, 사용한다.


\* 시작 후 20분이 지나면 자동 종료.  
\* 자극 중이라도 자극모드 및 강도 변경 가능  
\* 자극 중이라도 전원버튼을 길게 눌러 자극 종료가 가능.

## 2-1. 자유로운 사용 예 (조정 후 자극기 결합)

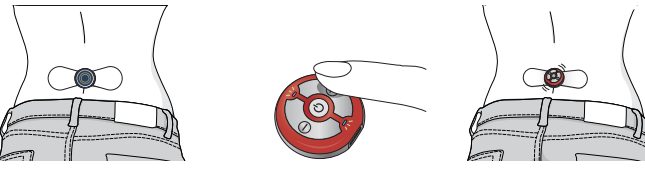


전극 부착 → 자극기 켜기 모드/강도 설정 → 자극기 결합 사용

## 2-2. 자유로운 사용 예 (자극 중 조정)

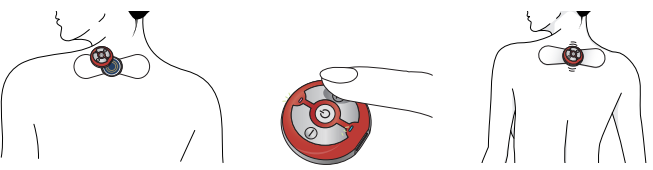

자극 중 자극기 분리 → 모드/강도 설정 변경 → 자극기 재결합 사용

## 사용방법 참고 (자극기 상세 설명)

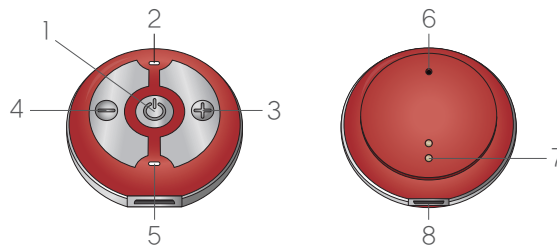

번호	명칭	기능
1	전원 버튼	전원/모드 설정 - (3초이상 누름) 전원 켜짐/꺼짐 - (짧게 누름) 자극 모드 설정 두드림, 주무름, 지압, 조합
2	램프 A	전원/모드 표시 (점멸) - 전원 켜고 끝때 점멸 : 초록 ● - 자극 모드 표시 : 두드림 (파랑 ●), 주무름 (분홍 ●), 지압 (하늘 ●), 조합 (연분홍 ●)
3	증가 버튼	자극 세기 증가
4	감소 버튼	자극 세기 감소
5	램프 B	동작 상태 표시 - 연결 대기 (초록 ●), 자극 중 (하늘 ●) - 배터리 부족 (주황 ●), 충전 중 (백색 ◻)
6	부저	자극기 조작음 및 알림음 출력
7	자극 출력 단자	전기 자극이 출력 되는 단자, 전극과 연결되어 전기 자극을 전달
8	충전 단자	충전케이블 연결 (5핀 micro USB)